



Einfach mobil.

e-fix[®]

Elektrischer Zusatzantrieb



VON KRANKENKASSEN
ZUGELASSEN

Klein. Leicht. Wendig.

www.alber.de



*„Wie schön, wieder
gemeinsam unterwegs
zu sein.“*

Mobilität einfach erfahren

Neue Unabhängigkeit genießen

Mit dem e-fix, dem elektrischen Zusatzantrieb für Ihren Rollstuhl, erweitern Sie einfach Ihren Bewegungsfreiraum. Ganz ohne Anstrengung bewältigen Sie so auch längere Strecken oder Steigungen.


Die Umrüstung ist völlig unkompliziert: Durch Ihren Fachhändler werden lediglich die Antriebsräder ausgetauscht sowie Akku-Pack und Bediengerät montiert – fertig. Die Motoren sind dezent in den Radnaben versteckt. Alle gängigen Rollstuhlmodelle lassen sich auf diese Weise mit dem e-fix ausrüsten. Das heißt: Sie können weiterhin Ihren optimal angepassten und gewohnten Rollstuhl verwenden.

Der e-fix bringt Sie mühelos an Ihr Ziel: Egal ob im Haus, beim Einkaufen oder auf Tour mit dem Pkw.

Flexibel bleiben – zwei Rollstühle in einem!

Wenn es die Situation erfordert, lässt sich der e-fix auch spielend leicht manuell bewegen: Sie kuppeln die Antriebsräder mit einem Handgriff aus und Ihr Rollstuhl lässt sich wie gewohnt von Hand anschieben – entweder über die Greifreifen oder durch eine Begleitperson.

Die e-fix Komponenten:

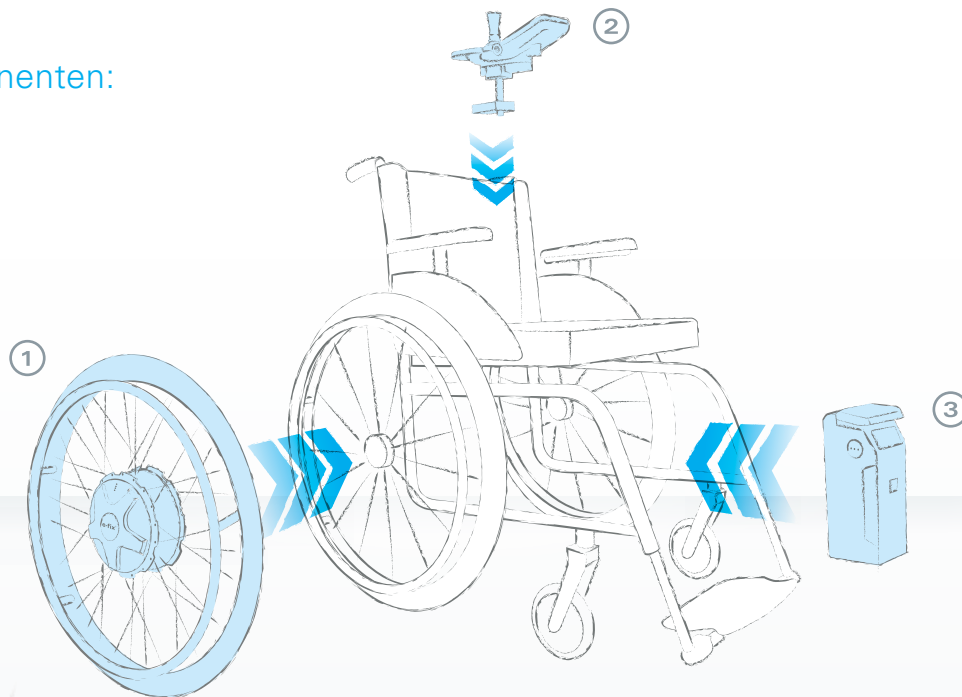

①

KRAFTVOLL – die Antriebsräder

Per Schnellverschluss bequem am Rollstuhl anzubringen und abzunehmen, platzsparend für den Transport.



②

ERGONOMISCH – das Bediengerät

Ergonomisch angeordnete Bedienelemente, große und informative Displayanzeige, individuell einstellbare Fahreigenschaften.



③

KLEIN UND LEICHT – der Akku-Pack

Platzsparend unter dem Sitz eingehängt, reicht für eine Fahrstrecke bis zu 16 km*.

* abhängig von Personengewicht, Rollstuhleinstellungen und Untergrund. Mit optionalem, kapazitätserweitertem Akku-Pack Reichweite bis 20 km.

*„Mit dem e-fix ist mein
Alltag viel leichter.“*



Mehr Mobilität. Aber wie?

Einfach bedienfreundlich

Ihr Rollstuhl lässt sich mit dem e-fix kinderleicht steuern – Sie werden auf Antrieb zurechtkommen! Die Geschwindigkeit stellen Sie am griffgünstigen Regler stufenlos von 0,5 bis 6 km/h ein. Dabei gilt: Je langsamer Sie fahren, desto weniger verhält sich Ihr Rollstuhl. Sie lenken, der e-fix denkt!

Auch sonst bietet Ihnen das kleine Bediengerät großen Fahrkomfort. Sein klares, beleuchtetes Farbdisplay liefert alle wichtigen Informationen, wie Akku-Ladung und Geschwindigkeit, auf einen Blick. Und wenn Sie möchten, passen Sie Ihren e-fix mit der intuitiven Menüführung mühelos Ihren persönlichen Wünschen an. Zudem sind intelligente Zusatzfunktionen enthalten, wie die integrierte Umfeldbeleuchtung*, die bei Dunkelheit den Fahrweg ausleuchtet.

Mehr Freiheit im Alltag

Die zwei leisen, aber leistungsstarken Antriebe machen den e-fix sowohl im Außen- als auch im Innenbereich zum idealen Begleiter. Einerseits auf der Stelle drehen und auf engstem Raum rangieren, andererseits aber kraftvoll und sicher Steigungen** bewältigen – kein Problem für den e-fix.

* nicht gemäß StVZO

** bis zu 20 % Steigung und Gefälle möglich, abhängig von der e-fix Version und dem Rollstuhlmodell

Leicht und handlich

Der Akku-Pack Ihres e-fix ist mit nur 2,1 kg Gewicht extrem leicht und mit nur 8 cm Breite sehr schmal. Dank der intelligenten Akku-Aufnahme genügt eine Hand zum Entnehmen bzw. Einsetzen. Die meisten Faltrollstühle lassen sich sogar mit eingebautem Akku zusammenfallen.



Aussagekräftiges Farbdisplay und benutzerfreundliche Bedienelemente



Kompakt, leise, kraftvoll: der e-fix Antrieb

Maßarbeit wie Ihr Rollstuhl

Konfigurieren Sie Ihren e-fix individuell.

Der e-fix passt sich Ihren Bedürfnissen an – ob sanft oder sportlich: Der Antrieb lässt sich individuell programmieren. Somit werden die Fahreigenschaften maßgeschneidert auf Sie angepasst. Das Bediengerät kann für Links- oder Rechtshänder passend montiert werden.

Mit den optional erhältlichen Antriebsrädern mit höherer Leistung kann der e-fix bis zu einem Personengewicht von 160 kg genutzt werden. Und wenn Sie mal nicht selbst fahren möchten, dann einfach die intuitive Begleitsteuerung einstecken und der e-fix wird zur Schiebe- und Bremshilfe für Ihre Begleitperson. Ein umfangreiches Zubehörprogramm bringt zusätzlich Erleichterung und Komfort ins Leben.



e-fix E36: kraftvolle Antriebsräder mit mehr Leistung (optional)



Ausgezeichnete Produkte erkennt man an ihren cleveren Details.

Der kleine Lithium-Ionen Akku-Pack ist mit nur 2,1 kg besonders leicht und somit sehr praktisch in der Handhabung. Die lange Lebensdauer und die 24-monatige Herstellergarantie sorgen rundum sicher für mobile Energie.

Durch das Magnet-Stecker-System EasyConnex findet der Stecker des Bediengeräts und des Ladegeräts sicher in seine Position. Auch die Auto-Kontaktierung des Akkus in der innovativen Akku-Aufnahme ist äußerst hilfreich im Alltag.

Vielfältiges Zubehör



Intuitive Begleitsteuerung: Auf Knopfdruck wird aus dem e-fix eine Schiebe- und Bremshilfe für die Begleitperson.



Schwenkarm: Erleichtert das direkte Heranfahren an Tische.



Aufbock-Kippstützen: Kippschutz, der auch das Abnehmen der e-fix Räder erleichtert.

und vieles mehr... Alber oder Ihr örtlicher Sanitätsfachhändler beraten Sie gerne ausführlich zum umfangreichen Zubehörprogramm.



„Klasse!
Der e-fix ist ruckzuck
zerlegt und verladen.“

Handliche Technik für unterwegs



So klein. So gut.

Geringes Gewicht, kein Werkzeug nötig. Zum Verladen nur die Schnellverschlüsse lösen und die e-fix Komponenten vom Rollstuhl abnehmen. Kein Teil wiegt mehr als 7,9 kg, alles findet in jedem Kofferraum bequem Platz. Am Ziel ist der e-fix Rollstuhl dann ebenso schnell wieder fahrbereit.

Service



Keine Sorge: Der einzigartige 48-Stunden Mobilitätsservice von Alber sorgt dafür, dass Sie bei einem Funktionsausfall innerhalb kürzester Zeit wieder mobil sind.

MADE IN GERMANY

Made in Germany vom Marktführer für Zusatzantriebe.

Auf den e-fix ist Verlass

Der e-fix ist ein Produkt von Alber, dem Spezialisten für besonders portable und bedienerfreundliche Mobilitätshilfen. Unabhängige Institutionen haben den e-fix auf Langlebigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit getestet und positiv bewertet.

An erster Stelle stehen für uns Sicherheitsprüfungen – zum Beispiel durch den TÜV: Sie erhalten bei Alber stets geprüfte Produktsicherheit nach den aktuellsten Richtlinien für Medizinprodukte.



e-fix auf einen Blick. Die häufigsten Fragen und Antworten.

„Passt der e-fix an meinen Rollstuhl?“

Der e-fix passt an die meisten Rollstuhlmodelle. Es werden am Rollstuhlrahmen Halterungen zur Aufnahme der Antriebsräder montiert. Ihre manuellen Rollstühle können Sie in der Regel weiterverwenden.

„Wie schnell fährt der e-fix?“

Die maximale Geschwindigkeit des e-fix können Sie stufenlos zwischen 0,5 und 6 km/h wählen. So finden Sie mit Sicherheit Ihr optimales Fahrtempo. Das Fahrverhalten kann von Ihrem Fachhändler im Detail an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

„Welche e-fix Varianten gibt es?“

Der e-fix ist für ein max. Personengewicht von 120 kg ausgelegt. Die verstärkten und leistungsstärkeren Antriebsräder (optional erhältlich) erlauben sogar ein Personengewicht von bis zu 160 kg. Den e-fix gibt es in den Radgrößen 22" oder 24".

„Hilft der e-fix auch meiner Begleitperson?“

Ja! Mit der als Zubehör erhältlichen Halterung lässt sich das Bediengerät an den Schiebegriffen des Rollstuhls montieren. Die optionale intuitive Begleitsteuerung erleichtert der Begleitpersonen das Schieben.

„Wie weit komme ich mit einer Akkuladung?“

Abhängig von Personengewicht, Geländeform, Temperatur, Rollstuhleinstellungen und Untergrund reicht eine Akkuladung für bis zu 16 km. Mit dem optional erhältlichen großen Akku-Pack erhöhen Sie die Reichweite auf bis zu 20 km. Alternativ ist auch ein zusätzlicher Wechselakku eine optimale Lösung, um die Reichweite zu erweitern.

„Wie steil darf eine Rampe oder Steigung sein?“

Der e-fix schafft – abhängig von Rollstuhleinstellungen, Personengewicht und Untergrund – Steigungen bzw. Gefälle bis zu 20 %.**

* In Abhängigkeit vom verwendeten Rollstuhl und von der Eignung der Bedienperson sind Einschränkungen möglich.

** bis zu 20 % Steigung und Gefälle möglich, abhängig von der e-fix Version und dem Rollstuhlmodell

„Kann der e-fix auch im Auto mitgenommen werden?“

Ja! Der modulare Aufbau macht's möglich. Alle e-fix Komponenten können einfach und ohne Werkzeug vom Rollstuhl abgenommen und platzsparend in jeden Pkw-Kofferraum verladen werden. Ihr Rollstuhl bleibt weiterhin faltbar.

„Wieviel wiegt der e-fix?“

Antriebsräder (E35)	je 7,9 kg	Bediengerät	0,6 kg
Akku-Pack	2,1 kg	Schnittstelle	0,8 kg
Gesamtgewicht (E35)	19,3 kg		

Der e-fix ist ein von den Kostenträgern anerkanntes **Hilfsmittel** und unter der Positionsnummer **18.99.05.1018** im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen gelistet (bzw. **18.99.05.1019** für die stärkere Version).

Der e-fix ist CE-konform gemäß der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) 2017/745 und ist auf freiwilliger Basis durch den TÜV Süd geprüft und zertifiziert, nach der aktuell gültigen Ausgabe der Produktnorm EN 12184.

Unser Qualitätsanspruch: Ihre Sicherheit! Unser Unternehmen ist zertifiziert nach dem aktuellen Qualitätsmanagement-Standard ISO 13485 für Medizinprodukte. Die umweltgerechte Herstellung unserer Produkte stellen wir mit unserem Umweltmanagementsystem, zertifiziert nach ISO 14001, sicher.

Gewichtsangaben	e-fix E35	e-fix E36
Max. Personengewicht:	120 kg*	160 kg*
Max. Gesamtgewicht:	170 kg*	210 kg*

(e-fix, Rollstuhl, Rollstuhlfahrer)

„Ich habe den e-fix getestet und war sofort überzeugt.
Vereinbaren auch Sie noch heute einen Termin für
eine kostenlose Produktvorführung.“



0800 1224567 (gebührenfrei)



www.alber.de/e-fix-testen



Alber GmbH

Vor dem Weißen Stein 21
72461 Albstadt
Telefon 07432 2006-0
Telefax 07432 2006-299
endkundenbetreuung@alber.de

www.alber.de

